

取扱説明書

コンパストレーニングマシン
トース *EXT/FLEX*

COP-2301Z

compass®

 このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。

 「取扱説明書」は

- ・ 1部を現場用として、常に参照できる状態を保ってください。
- ・ 1部を保存用として、大切に保管してください。

SAKAimed

もくじ

＊安全上のご注意	3
＊ご使用になる前に	7
環境について	7
＊各部の名称	8
構成	8
＊操作方法	9
アーム角度の調節について	9
パッドの調節について	10
座面の調節について	12
腰当て角度の調節について	14
フットレスト位置の調節について	15
腿固定ベルトについて	16
杖ホルダーについて	16
運動範囲の設定について	17
ウエイトの設定について	18
ラバーウエイトについて	18
＊基本的な運動方法	20
トースエクステンション動作について	20
トースエクステンションの 基本的な姿勢の設定	20
トースエクステンションの基本的な動作	21
トースフレクション動作について	22
トースフレクションの基本的な姿勢の設定	22
トースフレクションの基本的な動作	23
＊お手入れの仕方	24
＊機器の保守・点検について	24
＊保証とアフターサービス	25
＊仕様	26

用途

本製品は股関節のエクステンション（伸展）、フレクション（屈曲）の2種類の異なったトレーニングを1台で行うことができるダブルファンクションの機器で、股関節伸展筋群、脊柱起立筋、股関節屈曲筋群、腹直筋のトレーニングを行うためのものです。

特長

- 使用者の体格や運動レベルに応じてアーム角度、パッド位置、座面高さ、フットレスト位置、腰当て角度、ウエイト質量等を調節できます。
- 座面は大型で高齢者の乗り降りに適した高さになっているので、容易にトランスファーできます。

*安全上のご注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、各注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

注意事項を次のように区分しています。

-  **危険** … 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負うことに至るもの
-  **警告** … 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの
-  **注意** … 取り扱いを誤ると、傷害または物的損害の発生が想定されるもの

絵表示の意味

-  **禁 止**：してはいけない「禁止」内容のものです。
-  **強 制**：必ず実行していただく「指示」内容のものです。
-  **参 照**：取扱説明書参照。

設置

警告

-  **本製品は必ず水平な場所に設置する**
不安定な場所では本体の転倒等の恐れがあります。

使用上の注意

注意

-  **本体に寄りかかったり、ぶら下らない**
本体が転倒する恐れがあります。
-  **座面の上に立たない**
転倒や落下の恐れがあります。

運動前及び運動中

警告

運動中は絶対にウエイトスタックピンを操作しない

運動中にピンが外れると、ウエイトが落下し思わぬけがをする恐れがあります。

運動中は可動部に手足を近づけない

可動部に挟まれて思わぬけがをする恐れがあります。

運動を行う際は、周囲に障害物がないことを確認してから行う

他の人が機器に接近した場合は、安全を確認してから使用してください。運動中のアーム等が周囲の人や障害物に接触すると、けがをしたり機器が破損する恐れがあります。

注意

過負荷となるような無理な運動は絶対に行わない

運動の効果が無いだけでなく、けがの原因となります。

運動中はパッドから背中または手を放さない

ウエイトの急な落下やアームの思わぬ動きにより、けがをする恐れがあります。

運動中やウエイトが持ち上がっている時は、絶対にプランジャーを操作しない

その状態でアームの固定が解除されると、アームが急に動いてウエイトが落下し、思わぬけがや機器破損の恐れがあります。

無理な姿勢での運動は行わない

運動の効果が無いだけでなく、けがの原因となります。

床に障害物がないことを十分に確認

床に障害物等が転がっていないことを十分に確認してから機器へのトランスファーを行ってください。

ウエイトはゆっくりと下ろす

下のウエイトに勢い良く当てるような運動をすると、機器の破損の恐れだけでなく、けがの原因となります。

運動は安全な靴や運動向きの服装で行う

服装の一部が可動部に巻き込まれると危険です。

運動の前に各調節部の固定が確実にすることを確認

不完全なままで運動すると、調節部が急に動いて、思わぬけがをする恐れがあります。

パッドに回転方向以外の力をかけた運動をしない

回転方向以外に力をかけて運動をすると機器が破損しけがをする恐れがあります。

運動はゆっくりと行う

早く動かすと関節可動域を超え、けがをする恐れがあります。

腰当てマットには負荷をかけない

運動中腰当てマットに無理な力がかかりますと、機器が破損しけがをする恐れがあります。

各部の調節・設定

警告

！ ウェイトスタックピンを操作するときは、必ずウェイトが一番下にあることを確認

ウェイトが持ち上がった状態でピンを操作するとウェイトが落下し、思わぬけがをする恐れがあります。

！ ウェイト質量を調節するたびに、必ずウェイトスタックピンがマグネットで固定されていることを確認

運動中にピンが抜けると、ウェイトが落下したり急激に抵抗が変化し、思わぬけがをする恐れがあります。

注意

⊘ フットレストを強く引かない

フットレストが抜け落ちたり、本体より抜けた勢いによる転倒等で、思わぬけがをする恐れがあります。

⊘ 赤ラインが見えたら、それ以上フットレストを引かない

フットレストが抜け落ちたり、本体より抜けた勢いによる転倒等で、思わぬけがをする恐れがあります。

⊘ エンドストッパーにウェイトを強くぶつけたり、ウェイトが接触した状態からさらに強い力をかけない

エンドストッパーが動いて、思わぬけがをしたり、機器が破損する恐れがあります。エンドストッパーはあくまで運動範囲を設定するためのもので、完全なストッパーではありません。

⊘ アーム及びパッドに力がかかった状態のまま、アーム角度を調節しない

力が掛かっているとアームが急に回転し、けがをする恐れがあります。

⊘ ラバーウェイトピンをウェイトスタックピンとして使用しない

ラバーウェイトピンではウェイトを十分に固定できないため、ウェイトが落下し、思わぬけがをする恐れがあります。

！ アームの角度調節後は、固定が確実であることを確認

プランジャーのピンが穴にきちんと入っていないなど、固定が不完全で運動を行うと、アームが回転し、思わぬけがをする恐れがあります。

！ アーム角度調節の際は、挟み込みに注意

アームと本体の間に手や足を挟むと、思わぬけがをする恐れがあります。

！ アームを回転させるときは、カウンターウェイトにも注意

アームと同時にフレーム背面のカウンターウェイトも回転するので周囲に注意してください。

！ アーム角度、パッドの位置の調節は、必ずパッドを支えながら行う

支えずにプランジャーやクランプレバーを操作すると、急にアームが回転したり、パッドが動いて思わぬけがをする恐れがあります。

！ パッド位置を調節後は、クランプレバーが確実に締まっていることを確認

緩んだままで使用すると、軸部に無理な負荷がかかり機器が損傷したり、パッドの位置が急に動き思わぬけがをする恐れがあります。

！ ハンドル位置を調節後、レバーが他の部品に当たらないことを確認

機器の破損や、けがをする恐れがあります。

！ ラバーウエイトピンは、一番上のウエイトにしっかりと取り付ける。またピンのストッパーが効いていることを確認する

取り付けが不完全であったり、ストッパーが効いていない状態で使用すると、運動中ラバーウエイトピン及びラバーウエイトが落下し、思わぬけがをする恐れがあります。

！ 腰当ての調節は、必ず腰当てを支えながら行う

支えずにプランジャーを操作すると、腰当てが倒れて思わぬけがや機器の破損の恐れがあります。

！ スプリングカラーは必ず使用し、ラバーウエイトにしっかりと押し付け、確実に取り付ける

未使用もしくは取り付けが不完全な状態で使用すると、運動中にラバーウエイトが落下し、思わぬけがをする恐れがあります。

！ 腰当ての角度調節後は、固定が確実であることを確認

プランジャーのピンが穴にきちんと入っていないなど、固定が不完全で運動を行うと、腰当てが急に動き、思わぬけがや機器の破損の恐れがあります。

！ エンドストッパーはしっかり固定する

不完全な場合、アームの動きが止まらず、思わぬけがをする恐れがあります。

**⊘ 座面高さ調節レバーは握らない
(座面高さ調節時やバランス確保などのとき)**

レバーを握ると、座面とレバーの間に指をはさみ、けがをする恐れがあります。

！ エンドストッパーの位置を調節後、運動時にノブやキャップに他の部品がぶつからないことを十分に確認

機器の使用前に確認する

！ 座面高さ調節レバーは、必ず座面に座ってから操作する

座面に荷重が掛かっていないと、座面が急上昇し身体に当たり、思わぬけがをする恐れがあります。

！ フットレスト位置を調節後は、固定が確実であることを確認

ノブが緩んでいたり、ダブルロックノブのピンが穴にきちんと入っていないなど、固定が不完全で運動を行うと、フットレストが急に動き、思わぬけがをする恐れがあります。

！ 座面高さを調節後は、ロックノブが確実に締まっていることを確認

！ 腿固定ベルトが締め過ぎていないことを確認

！ ラバーウエイトピンには、付属のラバーウエイト以外は取り付けない

適切なサイズでないと、ラバーウエイトが落下し、思わぬけがをする恐れがあります。

＊ご使用になる前に

ご使用前に本製品について P.24 の**始業点検項目**にもとづき、始業点検を実施してください。またこれ以外でも部品が破損しているなど、日頃お使いになられていたときとは違う異常を感じましたら、本製品を使用せずに、最寄りの営業所にご連絡ください。

破損、異常を感じたままのご使用は、危険ですから絶対におやめください。


環境について

下記のような場所での使用及び保管は避けてください。

- 室外及び直射日光のあたるところ。
- 水平でない床面や段差のある不安定なところ。
- 周囲温度が 10℃～35℃の範囲を超えるところ。
- 湿気、ほこりの多いところ。
- 振動、衝撃の多いところ。

*各部の名称

トーソEXT/FLEX COP-2301Z

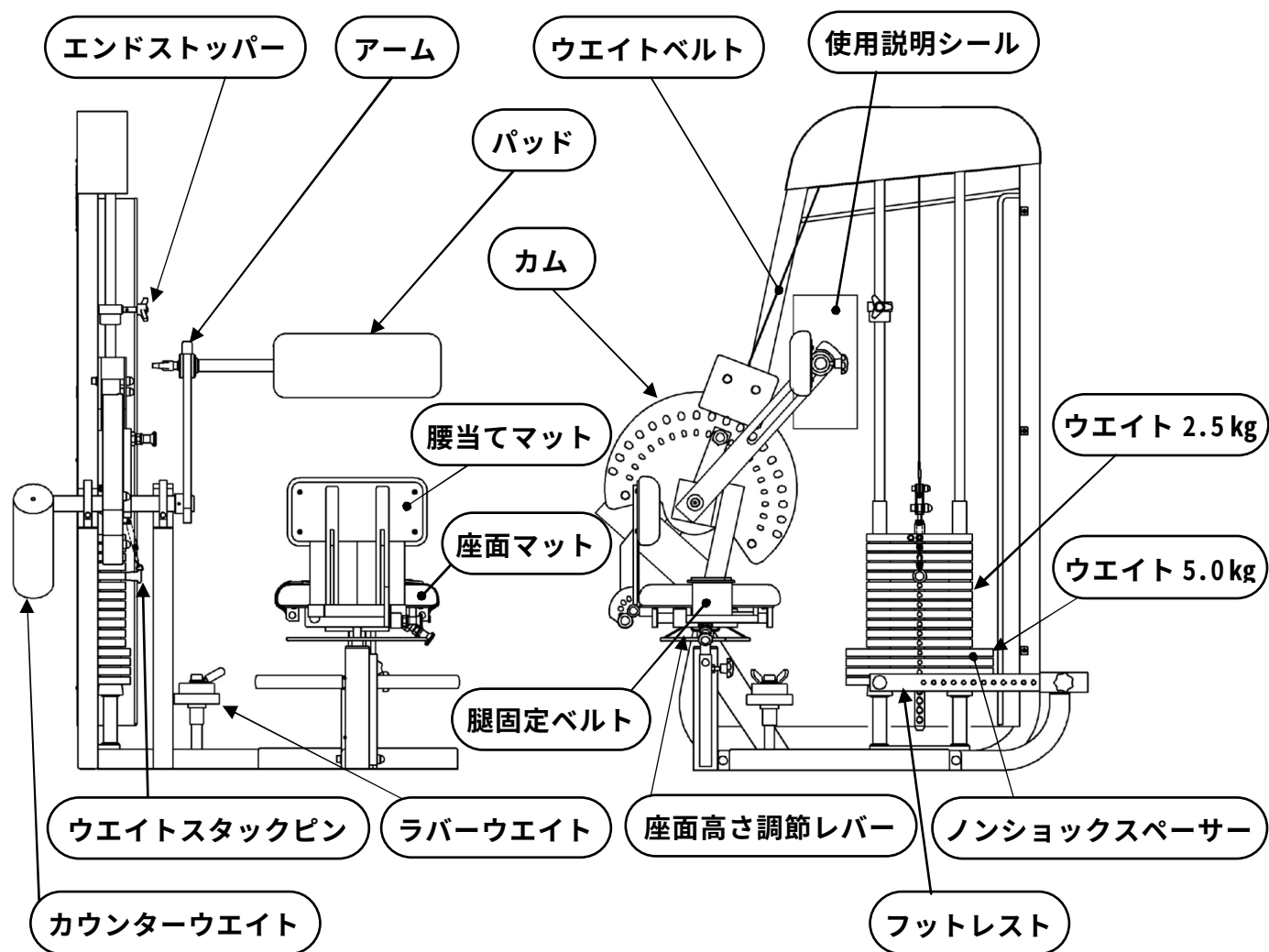

構成

トーソ EXT/FLEX (レザー色：ロイヤルブルー) COP-2301Z


オプションカラー (レザー色：ブラック) COP-2301ZB
 (レザー色：レッド) COP-2301ZR
 (レザー色：ライトグリーン) COP-2301ZG

*操作方法

アーム角度の調節について

アーム角度は 10° 刻みで調節でき、カムのスケールで確認できます。

- ① ウェイトが持ち上がっていないこと、アーム及びパッドに力が掛かっていることを確認します。
- ② パッドを手で支えます。
- ③ カム前面にある角度調節用のプランジャーを引いて、アームの固定を解除します。
- ④ プランジャーを引きながら、アーム角度を調節します。
- ⑤ 固定したい角度付近でプランジャーを戻し、アームを少し動かしてプランジャーのピンをカムの穴に入れ、アームを固定します。
- ⑥ アームを動かしてピンが入っていることを確認します。

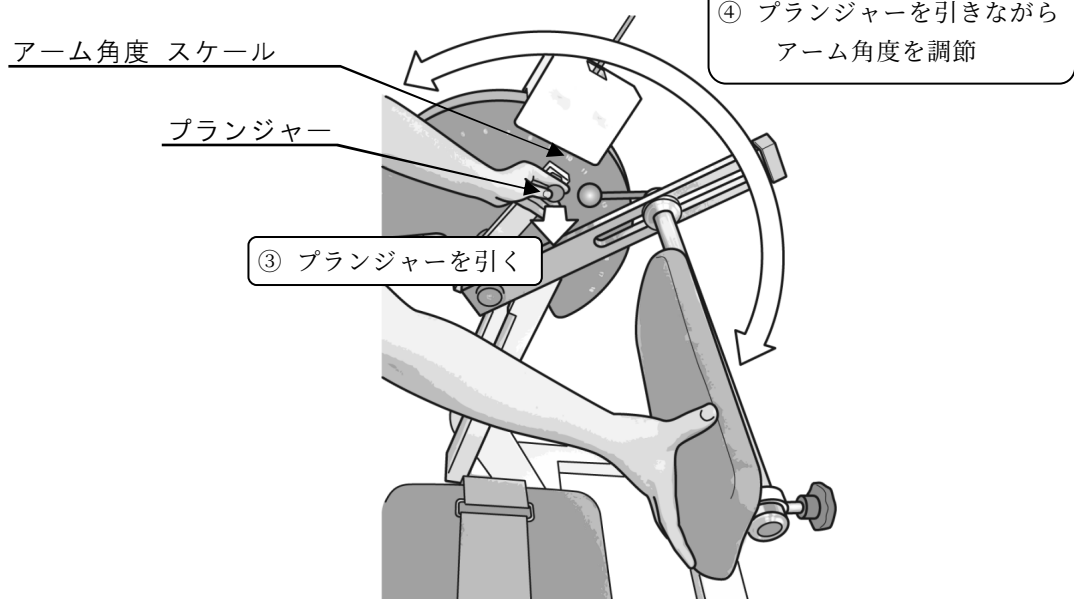

注意 ・運動中やウェイトが持ち上がっている時は、絶対にプランジャーを操作しない

・アーム角度の調節をするときは、

- 必ずパッドを支えながら調節
- アーム及びパッドに力が掛かった状態のまま調節しない
- アームと本体の間に手や足を挟まないように注意

・調節後は、プランジャーのピンが穴にきちんと入っていること、アームが確実に固定されていることを確認


・アームを回転させる前に周囲に人や障害物が無いか確認

パッドの調節について

パッド位置は 25cm の範囲で無段階に調節でき、アーム上のスケール(単位 cm)で確認できます。また、パッド角度も任意に設定できます。

■ パッド位置の調節

- ① パッドを手で支えます。
- ② アームの裏側のクランプレバーを操作しやすい向き(角度)にします。
- ③ レバーを(引かずに)反時計回りに回して、パッドの締め付けを緩めます。(1回転程度)
- ④ パッドの先端とレバーを持ってパッド位置を調節します。
- ⑤ 固定したい位置で、レバーを(引かずに)時計回りに回して締め付け、パッドをしっかり固定します。
- ⑥ ハンドル部分が邪魔にならないようアームと平行になる位置(角度)にします。

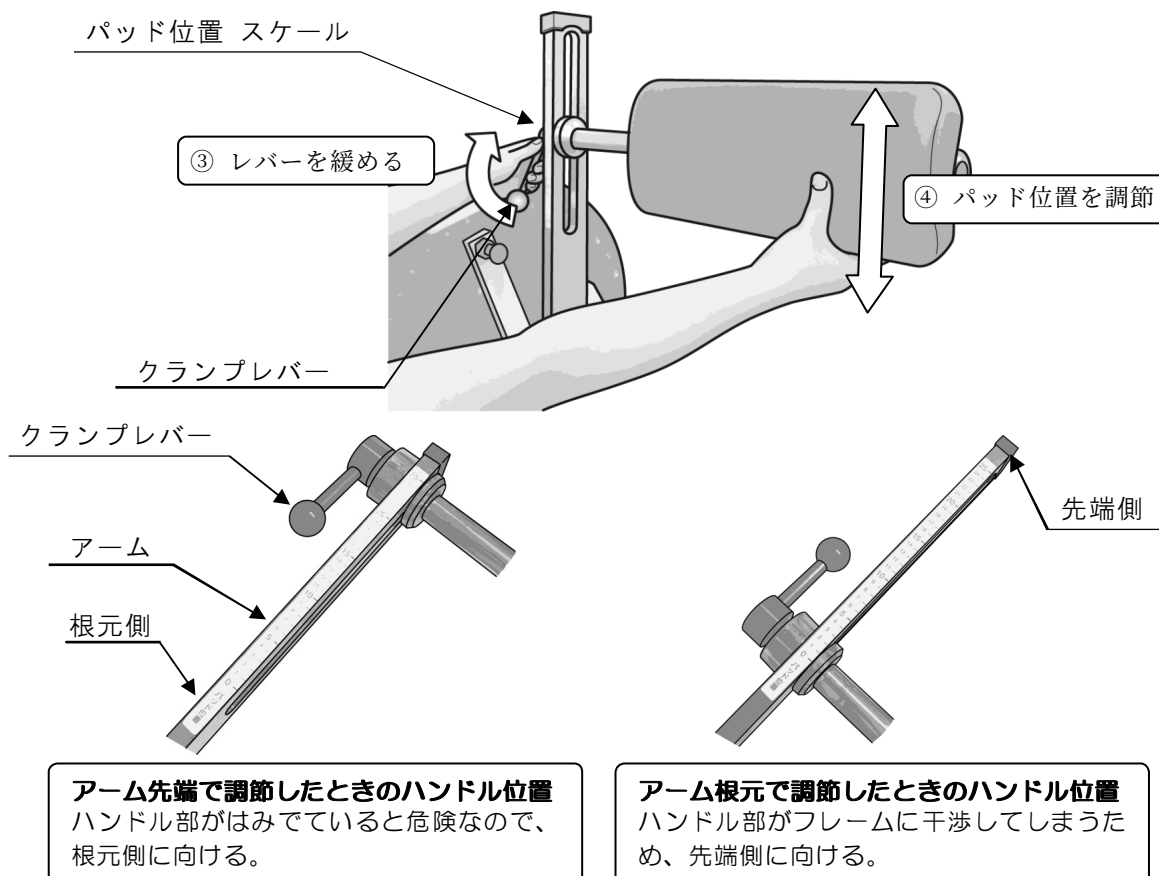

注意 ・パッド位置は、必ずパッドを支えながら調節

- ・パッド位置調節後はクランプレバーが確実に締まっていることを確認
- ・ハンドル部の位置調節後、運動時に他の部品に当たらないことを確認


参考

クランプレバーは緩めすぎないでください。レバーが抜け落ちる恐れがあります。

■ クランプレバーについて


クランプレバーはハンドル部分位置（角度）調節自在レバーです。ハンドル部分を使い易い向きにしたり、邪魔にならない向きに収納することができます。

- ① クランプレバーのハンドル部を手前へ引きます。
（レバーのロックが外れます）
- ② ハンドルを引いたまま任意の向きに回します。
- ③ ハンドルから手を放すと、内部のスプリングの力でハンドルが元の位置に戻り、ロックされます。

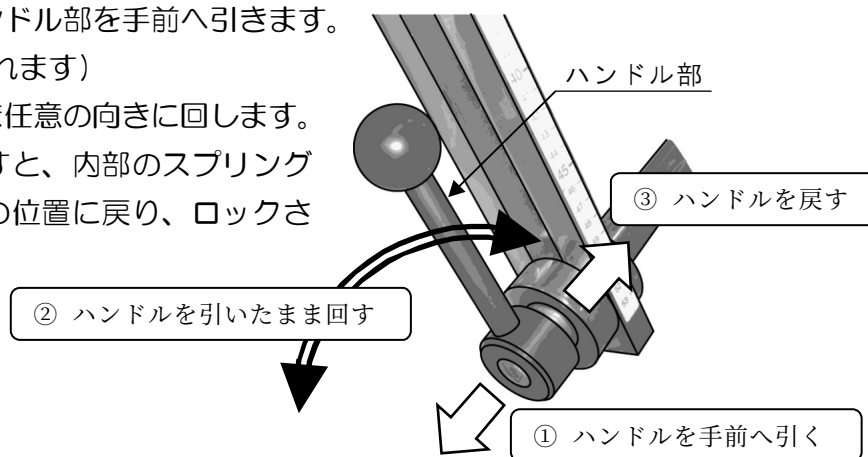

参考


例）クランプレバーを締めるとき、レバーを回せる空間がなく一度に締められない場合などは、①～②を何度か繰り返すとしっかり締めることができます。

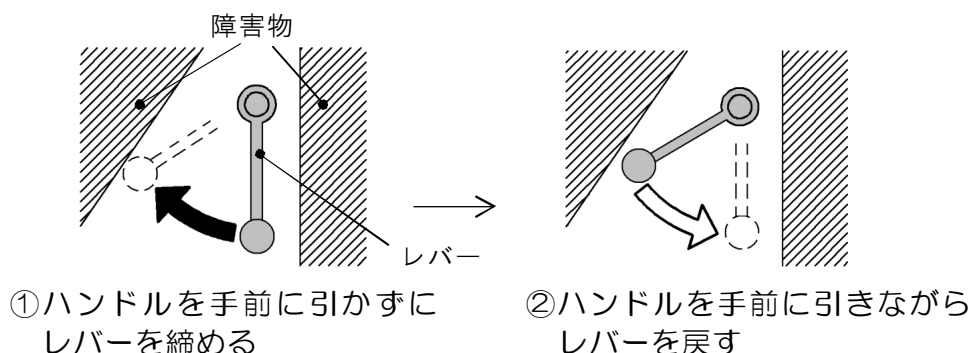

クランプレバーは緩ませ過ぎると、レバーが供回りしてハンドル位置の調節ができません。

■ パッド角度の調節

- ① パッド裏側のロックノブを2個とも反時計回りに回して緩めます。（1回転程度）
- ② パッドを回転させて角度を調節します。
- ③ 固定したい角度でロックノブを2個とも時計回りに回して締め付け、パッドをしっかりと固定します。

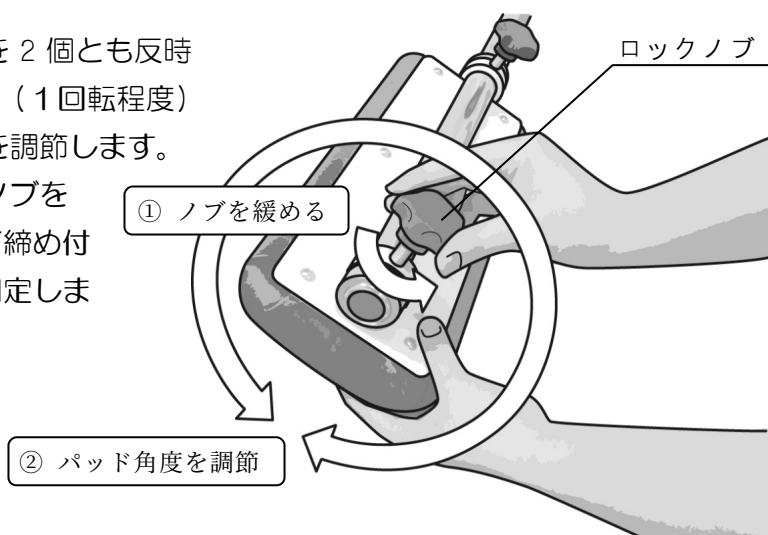


座面の調節について

座面高さは 190 mm の範囲内で無段階に調節でき、座面下の表示窓にスケールで表示されます。また、座面位置は前後方向に 22 mm 刻みで 5 段階(110 mm)の調節ができ、スケールで確認できます。

座面高さの調節

- ① 座面下部にあるロックノブを反時計回りに回して緩めます。
- ② 座面マットに座り、座面高さ調節レバーを下に下げます。
- ③ 座面高さを調節します。
下降させる場合は座面に体重をかけます。
上昇させる場合はフレーム下部または床面に足をついて腰を浮かせるようにします。
- ④ レバーを元の位置に戻します。
- ⑤ ノブを時計回りに回して締め付け、シートをしっかりと固定します。

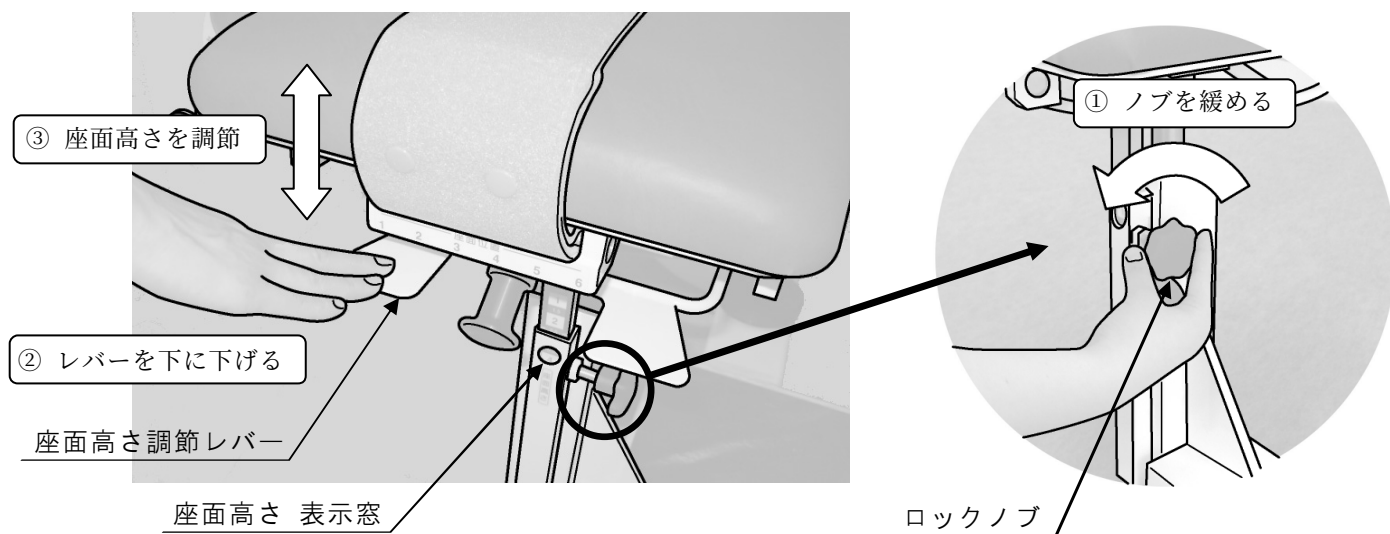


- 注意**
- ・座面高さ調節レバーは、必ず座面に座ってから操作
 - ・座面高さを調節するときは、高さ調節レバーを握らない
(座面高さ調節時やバランス確保などのとき)
 - ・調節後は、必ずロックノブが締まっていることを確認

参考

座面高さ調節レバーは、下だけでなく、上に上げて座面高さの調節が可能です。

■ 座面前後位置の調節

- ① 座面マットに座り、座面下部にあるプランジャーを引いて固定を解除します。
- ② プランジャーを引いたまま、座面の前後位置を調節します。
- ③ 固定したい位置付近でプランジャーを戻し、座面を少し前後させてプランジャーのピンを穴に入れ、位置を決めます。
- ④ 座面を動かしてピンが入っていることを確認します。

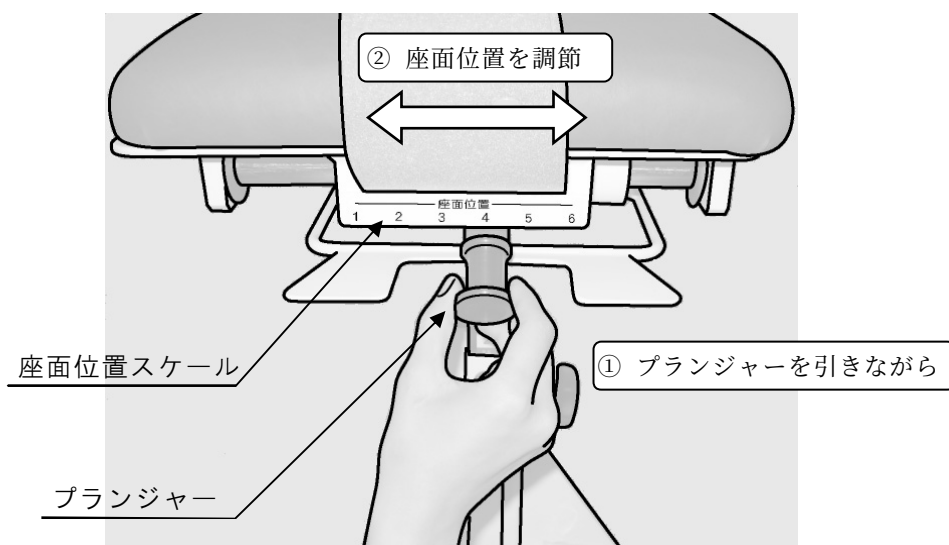


注意

調節後は、プランジャーのピンが穴にきちんと入っていること、座面が確実に固定されていることを確認

腰当て角度の調節について

腰当て角度は 90° ～ 210° に 30° 刻みで 5 段階に調節でき、スケールで確認できます。

- ① 腰当ての先端を持ちます。
- ② 腰当て下部のプランジャーを引いて、腰当ての固定を解除します。
- ③ プランジャーを引きながら、腰当て角度を調節します。
- ④ 固定したい位置付近でプランジャーを戻し、腰当てを少し動かしてプランジャーのピンを穴に入れ、腰当てを固定します。
- ⑤ 腰当てを動かしてピンが入っていることを確認します。

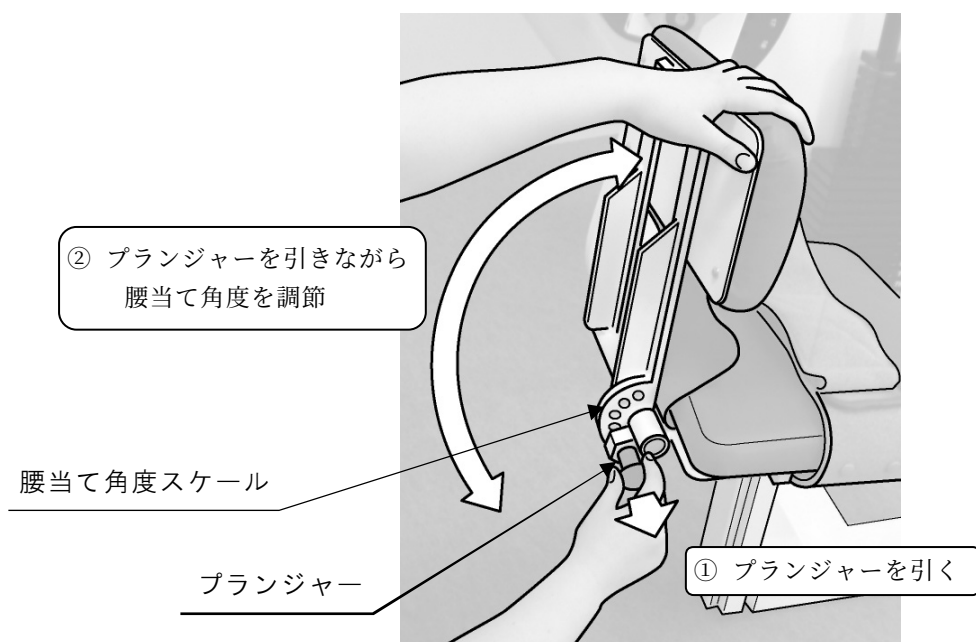


注意 ・腰当ての角度は、必ず腰当てを支えながら調節

・調節後は、プランジャーのピンが穴にきちんと入っていること、腰当てが確実に固定されていることを確認

フットレスト位置の調節について

フットレスト位置は前後に 25 mm 刻みで 17 段階(400 mm)に調節でき、表示窓にスケールで表示されます。

- ① フットレストを持ちます。
- ② ダブルロックノブを反時計回りに回して緩めます。(1 回転程度)
- ③ ノブを引いて、フットレストの固定を解除します。
- ④ ノブを引きながら、フットレスト位置を調節します。
- ⑤ 固定したい位置付近でノブを戻し、フットレストを少し前後させてノブのピンをフットレストの穴に入れ、位置を決めます。
- ⑥ フットレストを動かしてピンが入っていることを確認します。
- ⑦ ノブを時計回りに回して締め付け、フットレストをしっかりと固定します。

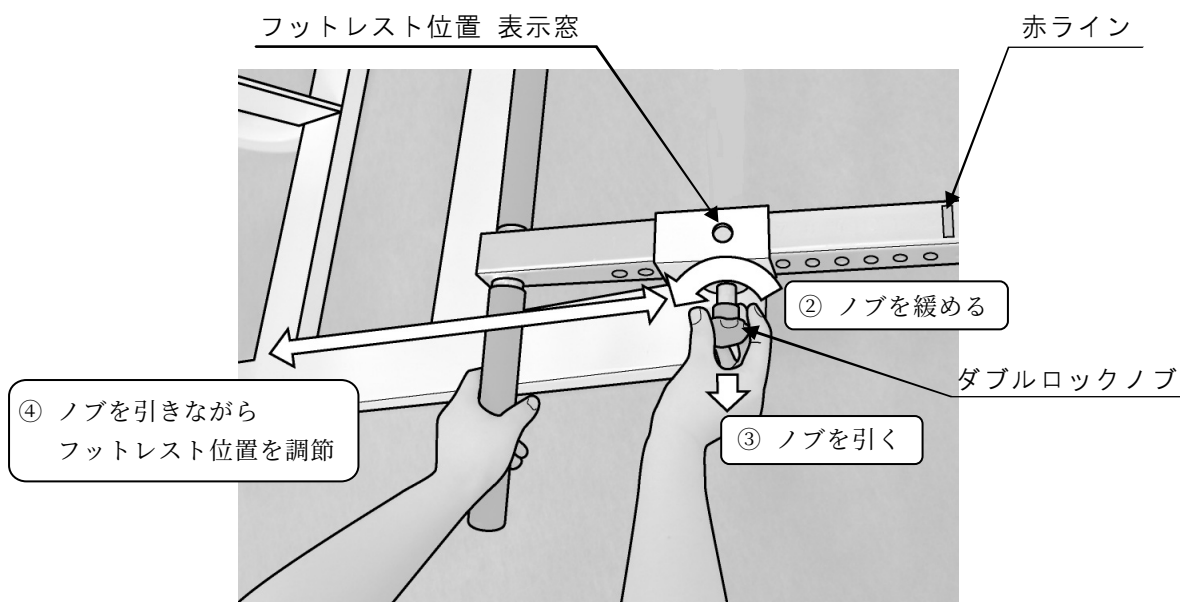

注意 ・フットレストを強く引かない

- ・赤ラインが見えたら、それ以上フットレストを引かない
- ・調節後は、ダブルロックノブのピンが穴にきちんと入っていること、ノブに緩みがないことを確認


参考

ダブルロックノブは緩めすぎないでください。1 回転程度緩めてノブを引き上げると調節が可能です。

腿固定ベルトについて

シート部には姿勢を保持するための腿固定ベルトが装備されています。


- ① 座面に座り、大腿部の上にベルトを右側から左側に向けて巻きつけます。
- ② 左側にある銀色の金具にベルトを通し、ベルト先端の黒い輪を引き上げます。
- ③ 引き上げたベルトを下のベルトに押し付け、固定します。

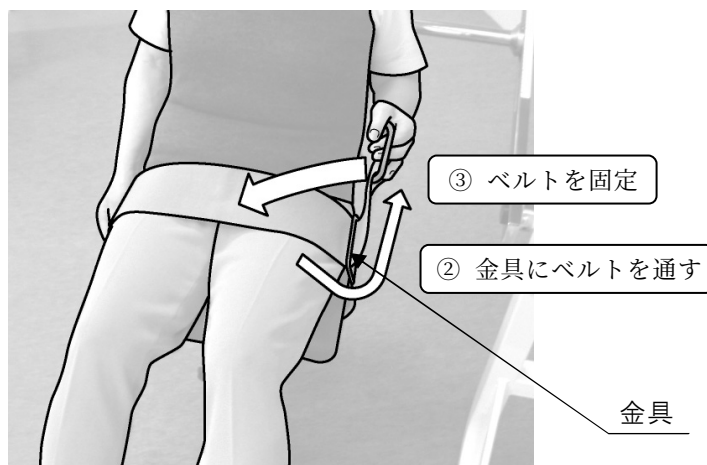

⚠ 注意 過度なベルトの締め付けには十分に注意

杖ホルダーについて

杖歩行者が運動する際の杖置き場です。

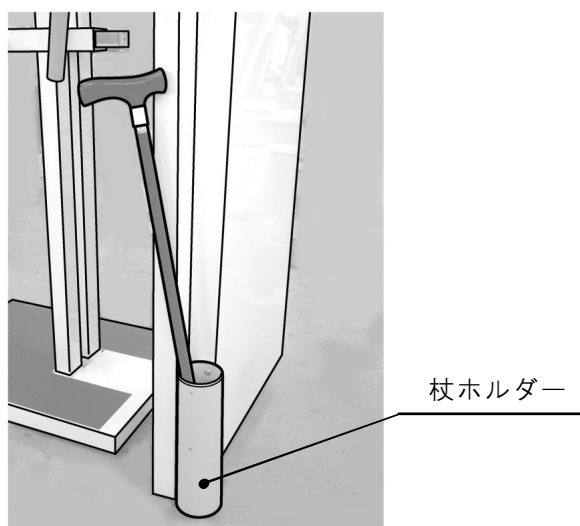

⚠ 注意 ・杖の把持部の向きに注意し、運動中に可動部と干渉しないことを確認
・杖ホルダーに杖を差し込んだまま、横方向に無理な力を掛けない


運動範囲の設定について

エンドストッパーの位置を調節することにより、運動範囲（アームの可動範囲）を設定できます。

■ エンドストッパーの調節方法

運動範囲はエンドストッパーのキャップが差し示したスケールで確認できます。

- ① ノブを反時計回りに回して、エンドストッパーの締め付けを緩めます。（1回転程度）
- ② ストッパーを上下に動かして位置を調節し、キャップの先端をウエイト後方のスケールに向けます。
- ③ ノブを時計回りに回して締め付け、ストッパーを固定します。
- ④ 運動したときにノブやキャップがぶつからないことを確認します。

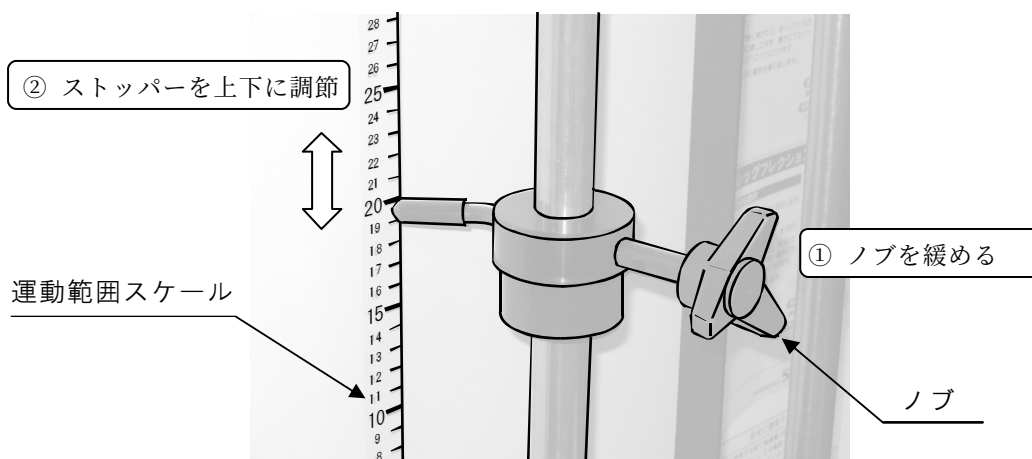

- 注意**
- ・エンドストッパーはしっかりと固定する
 - ・エンドストッパーにウエイトを強くぶついたり、ウエイトが接触した状態からさらに強い力をかけない
 - ・ノブは緩めすぎない
 - ・調節後は、運動したときにノブやキャップがぶつからないことを十分に確認

参考

機器を使用しないときは、エンドストッパーを最下部まで下げて固定しておくと、アームの動きを抑えることができます。

ウェイトの設定について


本製品では使用者の運動レベルに応じて 16 段階のウェイト質量に設定できます。

2.5 kg～30kg (2.5kg 刻み, 12 段階)

35 kg～50kg (5.0kg 刻み, 4 段階)

- ① ウェイトが全て一番下に下りていることを確認します。
- ② マグネットで固定されているピンをウェイトから抜き取ります。
- ③ 設定したいウェイトの中央の穴にピンを差し込みます。
- ④ ピンを完全に根元まで差し込んで、マグネットで固定します。
- ⑤ ピンを少し動かして、抜けないことを確認します。
- ⑥ アームを少し動かして、ウェイトが確実に持ち上がることを確認します。

ウェイトスタックピン

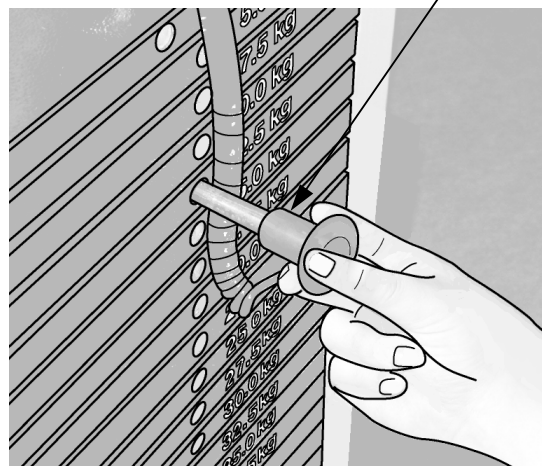

- 警告** ・ウェイトスタックピンを操作するときは、必ずウェイトが一番下にあることを確認
- ・ウェイト質量を調節するたびに、必ずピンがマグネットで固定されていることを確認
- ・運動中は絶対にウェイトスタックピンを操作しない

参考

機器の使用終了後、ウェイトスタックピンを最下部のウェイトに差し込んでおくと、アームの動きを抑えることができます。

ラバーウェイトについて



ラバーウェイトピン

ラバーウェイトー式



スプリングカラー



ラバーウェイト
0.5kg × 1 枚



ラバーウェイト
1.0kg × 2 枚


ラバーウェイト 0.5kg と 1.0kg を組み合わせることにより、ウェイト質量をより細かく 0.5kg, 1.0kg, 1.5kg, 2.0kg の 4 段階に設定できます。

- ① ラバーウエイトピンを一番上のウエイト
(2.5kg と表示のもの) の左側の穴に取り付け
ます。奥までしっかりと差し込んでください。

ラバーウエイトピン取付穴

- ② ピンを軽く引いて、簡単に抜けないことを
確認します。

- ③ 追加するラバーウエイトをピンに取り付け
ます。つばに当たるまでしっかりと通して
ください。0.5kg と 1.0kg を両方とも使用
する場合は、1.0kg を先に取り付けます。

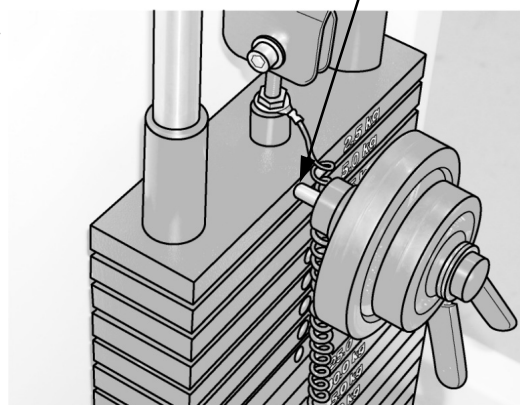

- ④ スプリングカラーのつまみを持ち、両方を近づけるように握ったままピンにはめ込
みます。カラーはラバーウエイトにしっかりと押し付けてください。

- ⑤ カラーのつまみから手を放すと、ラバーウエイトがピンに固定されます。


- ⑥ カラーを少し動かして、抜けないことを確認します。

- ⚠ 注意**
- ・ラバーウエイトピンには、付属のラバーウエイト以外は取り付けない
 - ・ラバーウエイトピンは、一番上のウエイトにしっかりと取り付ける
またピンのストッパーが効いていることを確認する
 - ・スプリングカラーは必ず使用し、ラバーウエイトにしっかりと押し付
け、確実に取り付ける
 - ・ラバーウエイトピンをウエイトスタックピンとして使用しない

参考

ラバーウエイト、ラバーウエイトピン、スプリングカラーを使用しないときは、ステッ
プ前方のラバーウエイトホルダーに保管できます。

ラバーウエイトホルダー

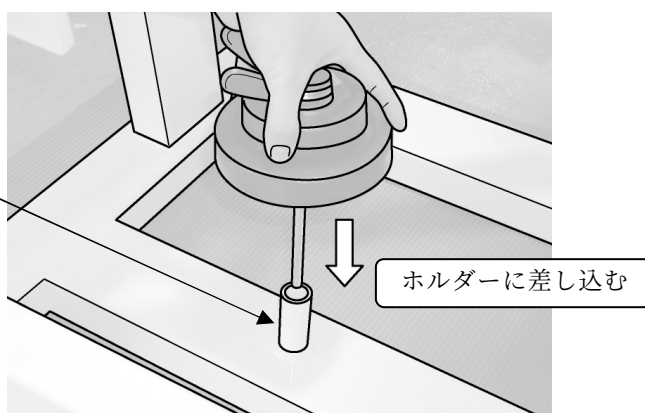

＊基本的な運動方法

トーソ EXT/FLEX による基本的な運動方法について説明します。その他応用的な運動方法については、専門の医師や指導員の指示に従って行ってください。

トーソエクステンション動作について


トーソエクステンション動作による関節の動きは、股関節伸展です。それにより股関節伸展筋群、脊柱起立筋のトレーニングを行うことができます。

○関節の動き

股関節伸展

○使用する筋肉

股関節伸展筋群
脊柱起立筋

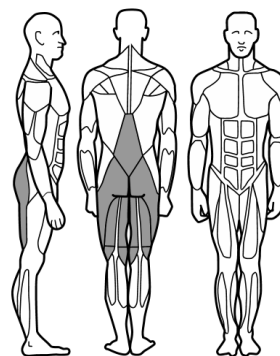

トーソエクステンションの基本的な姿勢の設定


各部の調節方法については、**操作方法** の項を参照してください。

- ① アームの回転軸がへその高さと同じになるように、座面の高さを調節します。
- ② 安定した姿勢がとれるようにフットレスト位置を調節して足を乗せます。
- ③ 大腿部をベルトで固定します。
- ④ 上体が垂直より少し前に倒れるように、アーム角度と背中のパッド位置を調節します。



- 注意**
- ・ 床に障害ないことを十分に確認
 - ・ 各調節部の固定は確実にを行う
 - ・ 無理な姿勢での運動は行わない
 - ・ 腰当てマットには負荷をかけない

トorsoエクステンションの基本的な動作

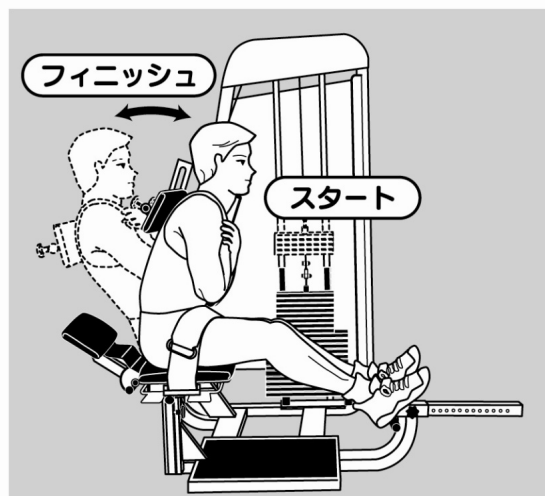

- ① エンドストッパーの位置を調節し、適切な運動範囲を設定します。
- ② 適切なウェイト質量を設定します。より細かく設定する場合は、ラバーウェイトを使用します。
- ③ 腕を胸の前に組みます。
- ④ 胸を張って上体をゆっくりと起こします。
- ⑤ 腰が軽く伸びてウェイトがエンドストッパーに当たったら、ゆっくりと元の位置に戻していき、静かにウェイトを下のウェイトにつけます。
- ⑥ ④～⑤の動作を繰り返します。

⚠ 警告 ・運動を行う際は、周囲に障害物がないことを確認してから行う
・運動中は可動部に手足を近づけない
・運動中は絶対にウェイトスタックピンを操作しない

⚠ 注意 ・パッドに回転方向以外の力をかけた運動をしない

参考

- ・適切なウェイト質量、運動範囲、及び運動回数等については、専門の医師や指導員の指示を受けるようにしてください。
- ・運動の際は反動をつけて力を入れないでください。効果的な運動ができなくなります。

トーソフレクション動作について


トーソフレクション動作による関節の動きは、股関節屈曲です。それにより股関節屈曲筋群、腹直筋のトレーニングを行うことができます。

○関節の動き

股関節屈曲

○使用する筋肉

股関節屈曲筋群
腹直筋

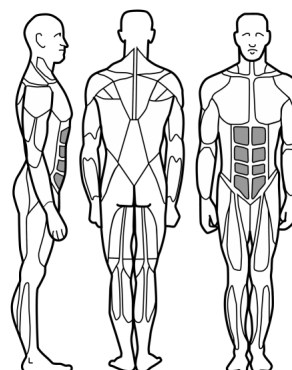

トーソフレクションの基本的な姿勢の設定


各部の調節方法については、**操作方法** の項を参照してください。

- ① アームの回転軸がへその高さと同じになるように、座面の高さを調節します。
- ② 足はフットレストの上に乗せるか床につけます。
- ③ 大腿部をベルトで固定します。
- ④ 上体が垂直になるように、アームの角度と胸のパッドの位置を調節します。



注意 ・床に障害ないことを十分に確認
・各調節部の固定は確実に
・無理な姿勢での運動は行わない
・腰当てマットには負荷をかけない

トorsoフレクションの基本的な動作

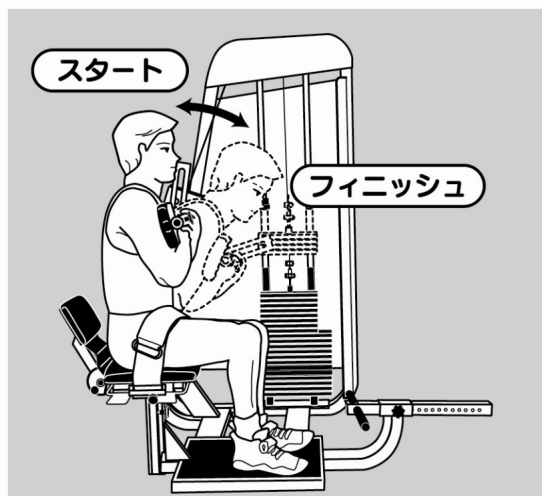

- ① エンドストッパーの位置を調節し、適切な運動範囲を設定します。
- ② 適切なウェイト質量を設定します。より細かく設定する場合は、ラバーウェイトを使用します。
- ③ 腕は下からパッドを抱えるようにします。
- ④ 軽く背中を丸めて、上体を前方にゆっくりと倒します。
- ⑤ 上体を倒してウェイトがエンドストッパーに当たったら、ゆっくりと元の位置に戻していき、静かにウェイトを下のウェイトにつけます。
- ⑥ ④～⑤の動作を繰り返します。

⚠ 警告 ・運動を行う際は、周囲に障害物がないことを確認してから行う
・運動中は可動部に手足を近づけない
・運動中は絶対にウェイトスタックピンを操作しない

⚠ 注意 ・パッドに回転方向以外の力をかけた運動をしない

参考

- ・適切なウェイト質量、運動範囲、及び運動回数等については、専門の医師や指導員の指示を受けるようにしてください。
- ・運動の際は反動をつけて力を入れないでください。効果的な運動ができなくなります。

*お手入れの仕方

- 本体についた汗や汚れはすぐに乾拭きしてください。
- ビニールレザーの清掃は、通常は乾拭き、水拭き、又は中性洗剤を使用してください。消毒にはアルコールを使用してください。シンナーは使用しないでください。

*機器の保守・点検について

- 本製品をご使用する際は、機器の管理者の方が下記の点検項目に基づき、必ず始業点検を実施してください。
- 長期間使用しなかった製品を使用再開する場合は、機器が正常に動作するか十分な点検を行ってください。
- 点検時に異常が発見された場合は、製品の使用を中止して最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

始業点検項目

区分	点検内容	点検方法
外観	周囲の障害物の有無	目視
	本体の安定性	水平な面に置かれ、ゴムマット上で安定していることを確認
	各部品のはずれ、ガタつき、取付ボルトの緩み、脱落	目視 または、スパナ等による確認
	ウエイトベルトの損傷	ベルトに傷・変形・磨耗などないことを確認
	ウエイトベルトの固定、張り	ベルトの両端がしっかり固定されていること、たるんでないことを確認
	座面マット、腰当てマット、パッド、腿固定ベルトの破れ、汚れ	目視
	フットレストの滑り止め	目視 (滑り止めが切れたりはがれたりしていないか)
機能	固定部のロック (パッド、アーム角度、座面、腰当て、フットレスト、ウエイトスタックピン、エンドストッパー)	各固定部のロックを確認
	座面のガススプリングの昇降・固定	座ったままで調整し、ガススプリングによる昇降がスムーズであること、固定が十分であることの確認
	アーム・ウエイトの動き	動きがスムーズであることを確認

*保証とアフターサービス

保証書と保証期間

保証書はよく読んで大切に保管してください。保証書がありませんと保証期間中でも代金を請求させていただく場合があります。

保証期間につきましては、正常な状態でご使用いただきながら故障した場合、本体フレームは5年間、それ以外は1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

修理を依頼される場合

修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

機種名 : COP-2301Z

お買い上げ年月 : 年 月

故障状況(できるだけ詳細に)

住所、氏名、電話番号

メーカーより指示のあるとき以外は、決してあけたり分解しないでください。

定期保守点検契約のお勧め

製品を長期間正常な状態で安全に使用できるように保証期間後の「保守点検契約」の締結をお勧めします。詳しくは「保守点検契約のお勧め」をご覧ください。弊社最寄りの営業所へお問い合わせください。

耐用期間

10年：保守点検などの当社推奨環境で使用された場合

損耗品

(使用により、磨耗・劣化・変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの)

正常な使用において、交換の目安が**約2年**のもの。

マット / パッド / 固定ベルト

正常な使用において、交換の目安が**約3年**のもの。

ウエイトベルト / ガススプリング

点検の時期が来ましたら弊社営業所までご用命ください。点検して必要により有償交換いたします。

保守部品の保有期間

保守用性能部品の保有期間は、販売中止後10年です。ただし、性能部品が製造中止などにより入手不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合があります。

*仕 様

ト-ソEXT/FLEX

COP-2301Z

外形寸法		1230(W)×1125(D)×1665(H)mm
総 質 量		240 kg
材 質	フレーム	スチール製，粉体塗装仕上げ
	ウエイト	スチール製，粉体塗装仕上げ
	アーム	スチール製，クロムメッキ仕上げ
	カム	プラスチック製
	プーリー	プラスチック製
	ウエイトベルト	ポリウレタン製，ワイヤー入り
	胸パッド	ビニールレザー製
	座面マット	ビニールレザー製
ウエイト 枚数	2.5kg	12 枚
	5.0kg	4 枚
	合計	16 枚
ウエイト合計質量		50 kg
付属品		ラバーウエイト（0.5kg×1 枚,1.0 kg×2 枚）
		ラバーウエイトピン 1 個
		スプリングカラー 1 個
		マグネットポケット 1 個
		足受ゴム 4 枚
		杖ホルダー 1 個

注．都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。